



Valiant / Rehab

Tapiz rodante

La baja altura de la superficie de carrera hace del modelo Valiant un tapiz perfecto para todo tipo de pacientes en el área de cardiología, rehabilitación y función pulmonar.



Valiant elevada al 25 %



Valiant pediátrica

La Valiant ofrece una aceleración suave desde 0 Km./h y es ajustable en modo continuo en un rango de 0,1 – 12 Km./h.(modelo Rehab) o 0,5 – 20 Km./h.

Gobernada por PC, o opcionalmente por la unidad de control (en uso independiente de conexión a PC)

Rango de elevación es 0-25%.

Unidad de control incluida con 9 protocolos programables

Superficie carrera: 150 x 50 cm.

Peso máximo de paciente: 160 Kg.

Paro de emergencia cinturón magnético incluido

Mínimo nivel de ruido

Mínima resistencia de rozamiento

La banda de carrera no requiere lubricación y se ajusta de modo automático.

Interfase de conexión a equipos periféricos RS232

Opciones

Frecuencia cardíaca

Consiste en una banda con receptor. Esta opción muestra el ritmo cardíaco en latidos por minuto en la pantalla de control, en combinación con la unidad de control programable, ofrece la posibilidad de programar protocolos controlados por el ritmo cardíaco (solo disponible con compra inicial del equipo)

Opciones de pediatría

Barras de ajuste pediátrico

Elevación negativa (trasera)

Mecánica o eléctrica: hasta -10%.

Paro de emergencia tipo seta

Botón de paro de emergencia adicional, el tapiz se detiene cuando el mismo es presionado.

Rampa de entrada

Rampa de acceso sin escalón

Barras laterales fijas ó ajustables y pediátricas frontales ó laterales

Arnés de seguridad, paro de caída fijo o móvil

Combinado con las barras laterales protege al usuario de caídas.

Modelos opcionales

Con unidad de control

Unidad de control incluida con 9 protocolos programables
La unidad de control de la Valiant ofrece posibilidades de programación para velocidad, elevación, y pruebas estándar como Bruce y Balke preprogramadas.

Valiant Plus

Aceleración suave desde 0 Km./h y es ajustable en modo continuo en un rango de 1 – 25 Km./h.
Puede ser gobernada por la unidad de control o por equipos externos (PC).
Rango de elevación es 0-25%.
Unidad de control incluida con 9 protocolos programables
Superficie carrera: 170 x 60 cm.
Peso máximo de paciente: 160 Kg.
Paro de emergencia cinturón magnético incluido.

Valiant Pediátrica


Prestaciones del modelo Rehab y superficie de carrera especial 127 x 50 cm

Valiant Special

Modelo con dimensiones especiales para por ejemplo sillas de ruedas con mayor superficie de carrera y otros requerimientos como mayor velocidad están disponibles bajo requerimiento



Unidad de control
Paro de emergencia
cinturón magnético

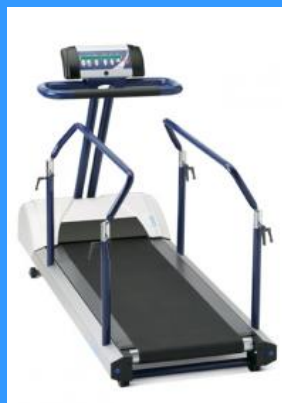

Valiant con barras
laterales ajustables



Valiant con Arnés de
seguridad, paro de
caída fijo

Certificados	• ISO 9001:2000, ISO 13485:2003, FDA, EU Medical Device Directive 93/42/EEC.
Peso máximo paciente:	160 kg.
Medidas del ergómetro:	Tamaño 213 x 90 x 135 Peso 149 Kg.
Requerimientos eléctricos:	230 VAC 50/60 Hz 115 VAC 50-60 Hz (2 fases)
Motor	1,8 Kw