

# cardiofax<sup>TM</sup>

Electrocardiógrafo ECG-3350

Diagnóstico de calidad combinado  
con una versatilidad total




Improving Healthcare with Advanced Technology

 NIHON KOHDEN


# Diagnóstico de calidad combinado con una versatilidad total

## Diagnóstico de calidad

- La avanzada tecnología de filtrado elimina el ruido con menos distorsión en las formas de onda
- El programa de análisis ECAPS 12C ofrece más de 200 resultados con un análisis detallado
- Registra datos precisos para un diagnóstico más rápido

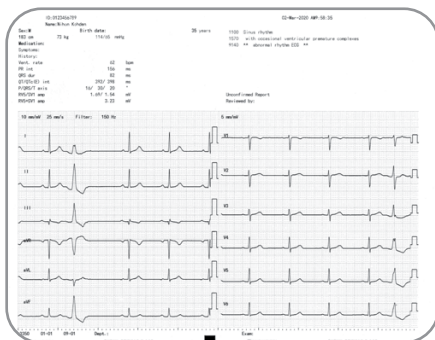

ECG de 12 derivaciones y 6 curvas con análisis

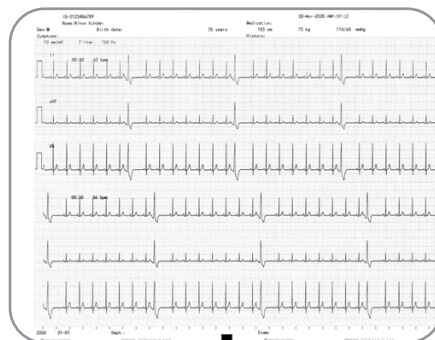


Registro de ritmo de 1 o 3 canales

## Examen de calidad

- Pantalla TFT en color de 8 pulgadas
- Visualización de formas de onda de 12 derivaciones
- Examen rápido y de alta calidad
- Medición precisa para evitar repetir las pruebas
- Diseño simplificado
- Interfaz fácil de utilizar

Los tres últimos minutos de las formas de onda del ECG de todas las derivaciones pueden almacenarse en la memoria interna. Esta gran capacidad de memoria garantiza la disponibilidad de la información necesaria.

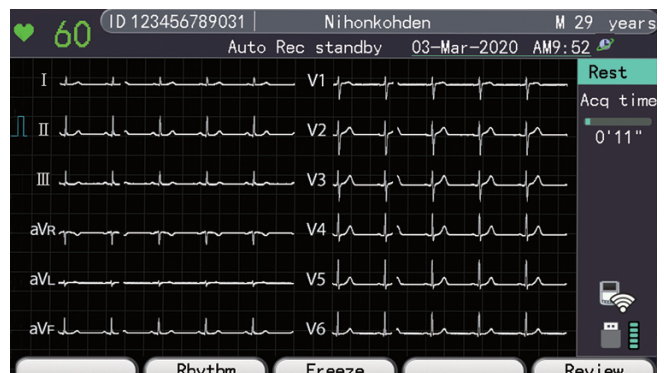



## Cómodo y sencillo de manejar



## Identificación de isquemias invisibles

Los electrocardiogramas de 12 derivaciones se analizan para identificar sospechas de infarto agudo de miocardio. Pero ¿es suficiente?

El ECG de 12 derivaciones y las derivaciones adicionales le proporcionan la capacidad de tomar decisiones críticas para reducir el tiempo de reperfusión. El synECi 18 facilita información adicional sobre el ventrículo derecho y la pared posterior a partir del ECG estándar de 12 derivaciones sin necesidad de más procedimientos.

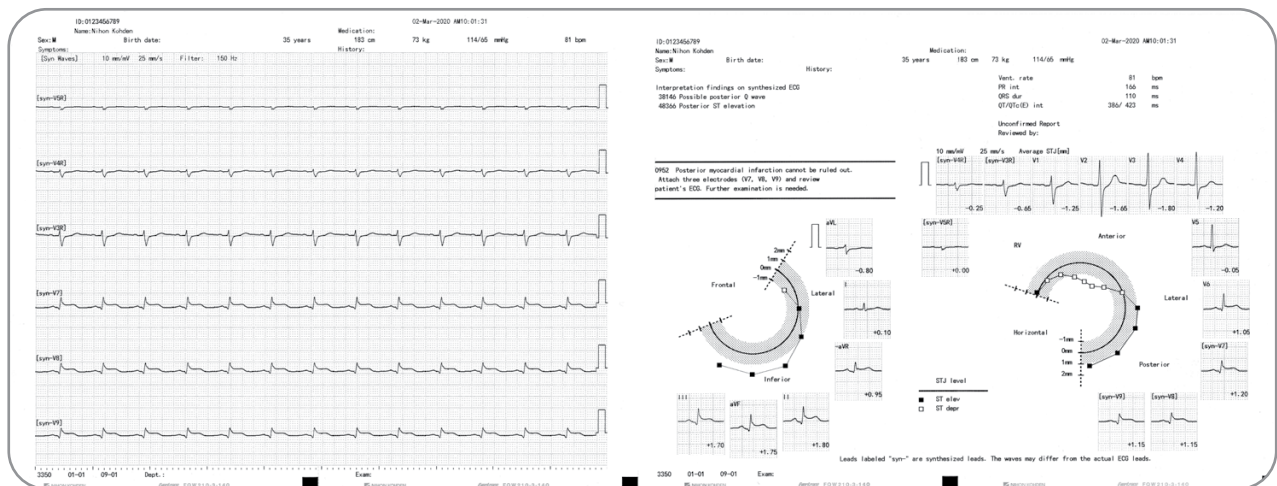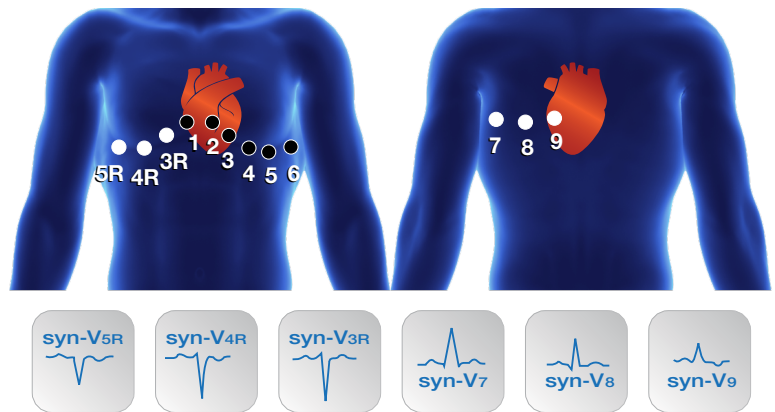

Seis derivaciones adicionales sintetizadas y gráfico ST

## Un espacio de trabajo digital para una gestión flexible de los datos

polaris.one


polaris.one es una plataforma de bases de datos en la que se pueden almacenar todos los datos médicos relevantes, compartirlos entre departamentos y acceder a ellos siempre que sea necesario.

El software polaris.one ha sido diseñado para mejorar la eficiencia de su organización eliminando obstáculos y ayudando a los profesionales de Cardiología y Neurología a centrarse en sus tareas diarias. polaris.one ofrece dos maneras de acceder a los datos del paciente cuando se va a medir un ECG:

- Escanee la identificación del paciente con un lector de códigos de barras una vez que el ECG esté conectado a Internet y recibirá todos los datos demográficos del paciente registrados en el sistema de información de su hospital
- o descargue la lista de los pacientes que van a examinarse en el ECG. Con este método, todos los datos están disponibles incluso si el equipo se desconecta de Internet.

## Accesibilidad de calidad

Los datos pueden transferirse a través de una red LAN con cable o inalámbrica. La comunicación DICOM permite una fácil integración con RIS y PACS. La función de “servidor web” proporciona una solución sencilla y única de almacenamiento de datos. Puede acceder a los datos de la memoria, revisarlos y extraerlos como archivo PDF desde un navegador web.

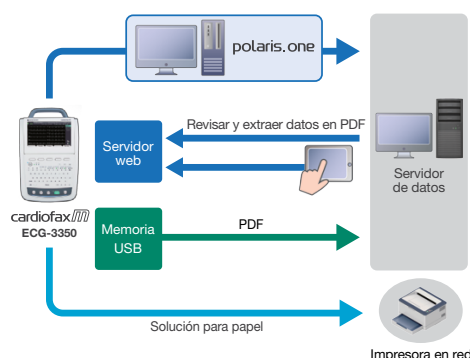

## Opciones

- Cardio Cream, F010
- Batería, X065
- Módulo LAN inalámbrico integrado, QI-330D
- 18 derivaciones sintetizadas, QP-230E
- Puente inalámbrico para WLAN300AN, E/WLAN300AN
- Cable de alimentación para WLAN300AN, E/WLAN300ANPOWERC
- Carrito, KD-107E
- Gancho para el cable del paciente, KH-100D
- Soporte de W-Lan, DI-021D
- Soporte para lector de tarjetas magnéticas, DI-022D
- Estante medio, DI-023D
- Cajón, DI-024D
- Juego de bandejas, DI-025D
- Soporte del rollo de papel, DI-026D
- Soporte para lector de códigos de barras, DI-027D

SD es una marca comercial de SD-3C, LLC.



## Improving Healthcare with Advanced Technology

Desde su fundación en 1951, Nihon Kohden ha tenido como misión mejorar la calidad de vida haciendo uso de tecnología avanzada. Ofrecemos soluciones de diagnóstico, cuidados intensivos, información clínica y diagnóstico in vitro. Además, nos esforzamos por colaborar con usted para superar los retos de la atención sanitaria presente y futura.

Visite [www.eu.nihonkohden.com](https://eu.nihonkohden.com) para obtener más información.

**NIHON KOHDEN IBERICA S.L.**  
C/Ulises, 75A, 28043 Madrid, España  
Teléfono: +34 91 7161080, Fax: +34 91 3004676  
Internet: <https://eu.nihonkohden.com>, E-mail: [info@nkib.es](mailto:info@nkib.es)

**NIHON KOHDEN EUROPE GmbH**  
Raiffeisenstrasse 10, 61191 Rosbach, Alemania  
Teléfono: +49 6003 827 0, Fax: +49 6003 827 599  
Internet: <https://eu.nihonkohden.com>, E-mail: [info@nke.de](mailto:info@nke.de)

**NIHON KOHDEN CORPORATION**  
1-31-4 Nishiochiai, Shinjuku-ku, Tokyo 161-8560, Japón  
Teléfono: +81 (3) 59 96-80 36, Fax: +81 (3) 59 96-81 00  
Internet: [www.nihonkohden.com](http://www.nihonkohden.com)